


各モードの使用法

LIFTモード（引き締め）

- ①洗顔をし、メイクや汚れを落とし、清潔の状態にします。
- ②お肌をお持ちの化粧水で濡らします。
※必ずお肌を濡らして使用ください。
※化粧水の種類や使用量はお客様ご自身の責任でご使用ください。万が一効果があらわれなかったり、お肌に違和感やトラブルが発生しても、弊社では一切責任を負いかねます。
- ③電源ボタンを2秒以上の長押しでオンにしLIFTモードを選択します。
※充電がなければ電源はオンとなりません。

- ④本体の裏面が下を向くように持ち、ヘッドをお肌に優しく押し当て、ゆっくり矢印の方向に滑らせます。（右図参照）

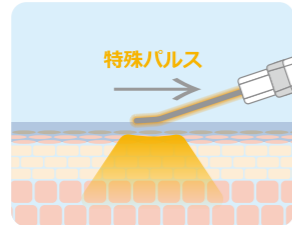

- ※目安:5秒間で10cm程
- ※10分間使用すると、自動で電源が切れます。

※一カ所だけに集中的に使用しないでください。お肌を傷めたり、ヘッド部が曲がったり、折れたりする可能性があります。それにより発生したお肌の怪我や製品の損傷は弊社では一切責任を負いかねます。動かし方はご自身のお肌の状態に合わせてアレンジしてください。

- ⑤電源ボタンを2秒以上の長押しで電源を切ります。
※入浴後に肌が温まった状態での使用がおすすめです。
※使用後は美容液や化粧水などで肌を調整してください。
※微弱電流を発生させるため個人差によってはビリビリとした感覚を感じる場合があります。


8

各モードの使用法

CLEANモード（ディープ洗浄）

- ①洗顔をし、メイクや汚れを落とし、清潔の状態にします。
- ②お肌をお持ちの化粧水または水で濡らします。
※必ずお肌を濡らして使用ください。
※化粧水の種類や使用量はお客様ご自身の責任でご使用ください。万が一効果があらわれなかったり、お肌に違和感やトラブルが発生しても、弊社では一切責任を負いかねます。
- ③電源ボタンを2秒以上の長押しでオンにしCLEANモードを選択します。
※充電がなければ電源はオンとなりません。

- ④本体の裏面が上を向くように持ち、ヘッドをお肌に優しく押し当て、ゆっくり矢印の方向に滑らせます。（右図参照）

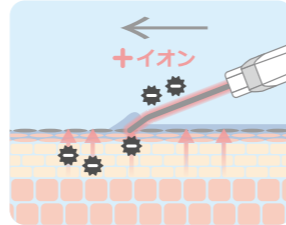

- ※目安:5秒間で10cm程
- ※10分間使用すると、自動で電源が切れます。

※一カ所だけに集中的に使用しないでください。お肌を傷めたり、ヘッド部が曲がったり、折れたりする可能性があります。それにより発生したお肌の怪我や製品の損傷は弊社では一切責任を負いかねます。動かし方はご自身のお肌の状態に合わせてアレンジしてください。

- ⑤電源ボタンを2秒以上の長押しで電源を切ります。
※入浴後に肌が温まった状態での使用がおすすめです。
※必ずサイドプレートに触れるように持ち、施術をおこなってください。
※使用後は美容液や化粧水などで肌を調整してください。


9

各モードの使用法

MOISTモード（浸透）

- ①洗顔をし、メイクや汚れを落とし、清潔の状態にします。
- ②お肌をお持ちの化粧水で濡らします。
※必ずお肌を濡らして使用ください。
※化粧水の種類や使用量はお客様ご自身の責任でご使用ください。万が一効果があらわれなかったり、お肌に違和感やトラブルが発生しても、弊社では一切責任を負いかねます。
- ③電源ボタンを2秒以上の長押しでオンにしMOISTモードを選択します。
※充電がなければ電源はオンとなりません。

- ④本体の裏面が下を向くように持ち、ヘッドをお肌に優しく押し当て、ゆっくり矢印の方向に滑らせます。（右図参照）

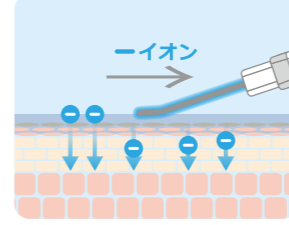

- ※目安:5秒間で10cm程
- ※10分間使用すると、自動で電源が切れます。

※一カ所だけに集中的に使用しないでください。お肌を傷めたり、ヘッド部が曲がったり、折れたりする可能性があります。それにより発生したお肌の怪我や製品の損傷は弊社では一切責任を負いかねます。動かし方はご自身のお肌の状態に合わせてアレンジしてください。

- ⑤電源ボタンを2秒以上の長押しで電源を切ります。
※入浴後に肌が温まった状態での使用がおすすめです。
※必ずサイドプレートに触れるように持ち、施術をおこなってください。
※使用後は美容液や化粧水などで肌を調整してください。

10

充電の仕方

- ①付属の充電ケーブルをmicroUSBポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。
- ②ランプが点滅すれば充電が始まります。
※充電しながらの使用はできません。
- ③ランプの点滅が点灯に変われば充電完了となりケーブルを抜いてください。
※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。
※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

製品仕様

入力：5V 1Aまで	重量：78g
サイズ：163mm×46mm×16mm	周波数：25000Hz
充電時間：約3時間	稼働時間：最大1時間
防滴対応：IPX6(ヘッド部のみ)	電源：microUSB
材質（ヘッド部）：ステンレス	

※使用環境により、消費電力が増加するため稼働時間が短くなる場合があります。

11

トラブルシューティング

- Q. 必ず化粧水が水と一緒に使用しないといけませんか。
A. 乾いた肌に使用すると肌に負担がかかりますのでお持ちの化粧水が水のご使用を推奨します。
- Q. 顔以外にも使えますか。
A. 使えません。
- Q. ランプがつかない、振動しない。
A. 充電してください。
- Q. 充電できない。
A. ケーブルがきちんと接続されているか確認してください。
- Q. 推奨の化粧水や使用量はありますか。
A. お持ちの化粧水でご使用ください。また化粧水の種類や使用量はお客様ご自身の責任でご使用ください。万が一効果があらわれなかったり、お肌に違和感やトラブルが発生しても、弊社では一切責任を負いかねます。
- Q. 別途付属品や部品だけの購入は可能ですか。
A. 販売しておりませんのでできません。
- Q. 使用中、ビリビリとした刺激や痛みを感じます。漏電ですか。
A. 漏電ではありません。人によっては刺激と感ずる場合がありますので気になる場合は使用を中断してください。
- Q. LIFTモード時のビリビリとした感覚を感じなくなった。
A. 何度か同じ箇所を施術し、肌がEMSの特殊パルスに慣れてくるとビリビリとした感覚を感じなくなることがあります。EMSの効果がなくなったわけではありません。

※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。
※説明書を製品HP上で更新している場合がありますので、その他ご不明な点は製品HPを参照ください。

12

故障かな？と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。
まずはもう一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくお読みください。

●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理を承ります。

・弊社へ直接修理依頼を行う場合

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから以下のページをご覧ください。
<https://www.nagaoka.co.jp/support/>

修理依頼品を送送される際は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の送付はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がありますので、送付前受付の際に確認をさせていただいております。万が一受付のない状態で商品を送付し、弊社で「製品異常なし」の判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。

電話番号：03-3479-9939 (受付時間9:00～17:30 土日祝日除く)
お問い合わせフォーム：<https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>

13

お買い上げありがとうございました。